

# TP 1 – Mesure de la concentration micellaire critique (CMC) par conductimétrie

## Objectifs du TP

### Objectifs scientifiques et cosmétologiques

- mettre en évidence le **comportement d'un tensioactif en solution aqueuse**,
- comprendre le lien entre **conductivité** et **concentration en ions libres**,
- déterminer expérimentalement la **concentration micellaire critique (CMC)**,
- relier un résultat expérimental à une **organisation moléculaire**.

### Objectifs méthodologiques (préparation E2)

- exploiter un **résultat expérimental**,
- analyser un **graphique scientifique**,
- identifier une **rupture de comportement**,
- rédiger une **conclusion scientifique argumentée**.

## Contexte professionnel

Les tensioactifs sont des composants essentiels des **produits cosmétiques lavants**(shampooings, gels douche, savons liquides).

Le **dodécylsulfate de sodium (SDS)** est un tensioactif ionique couramment utilisé.


En formulation cosmétique, il est essentiel de connaître la **concentration minimale efficace** à partir de laquelle les micelles se forment : la **CMC**.




## Documents fournis

### Document 1 – Le dodécylsulfate de sodium (SDS)

Le **dodécylsulfate de sodium** ou **Laurylsulfate de sodium** (noté en abrégé SDS dans la littérature anglo-saxonne où son nom est Sodium Dodecyl Sulphate) est un tensioactif ionique que l'on trouve dans les shampoings.

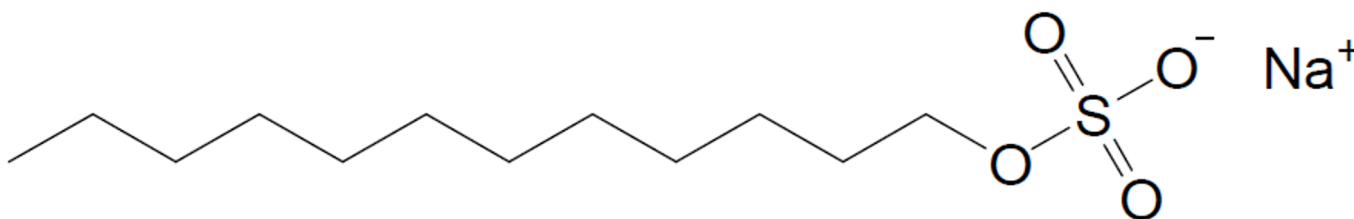

L'anion dodécylsulfate présente la particularité de posséder une tête hydrophile et une chaîne carbonée hydrophobe.

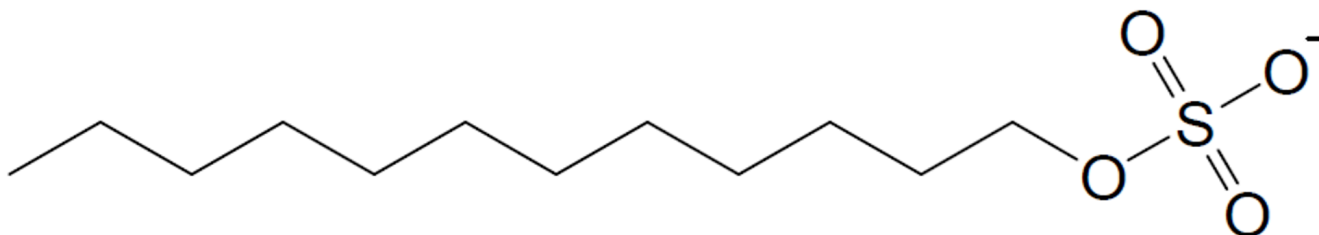

### Document 2 – La CMC : Concentration Micellaire Critique

En solution aqueuse, les ions dodécylsulfate peuvent s'organiser en donnant des agrégats microscopiques nommés **micelles**.

On envisage ici la formation de **micelles sphériques** : le cœur de la micelle est constitué des parties **hydrophobes** de l'ion dodécylsulfate ; les **têtes polaires** de cet ion, ainsi que des **contre-ions Na<sup>+</sup>**, se trouvent à la surface.

Les micelles ne se forment que si la concentration en tensioactif introduit  $C(\text{SDS})_{\text{introduit}}$  est **supérieure à une valeur limite** appelée **concentration micellaire critique (CMC)**.

On distingue deux situations :

- **Situation 1 :**

La concentration en tensioactif introduit  $C(\text{SDS})_{\text{introduit}}$  est **inférieure à la CMC**.


Les ions  $C_{12}H_{25}OSO_3^-$  sont **libres en solution** et leur concentration  $C(SDS)_{libre}$  est **égale à la concentration introduite**.

- **Situation 2 :**

La concentration en tensioactif introduit  $C(SDS)_{introduit}$  est **supérieure à la CMC**.

Des **micelles se forment**.

La concentration  $C(SDS)_{libre}$  des ions  $C_{12}H_{25}OSO_3^-$  libres est alors **égale à la CMC**, même si la concentration introduite continue d'augmenter.

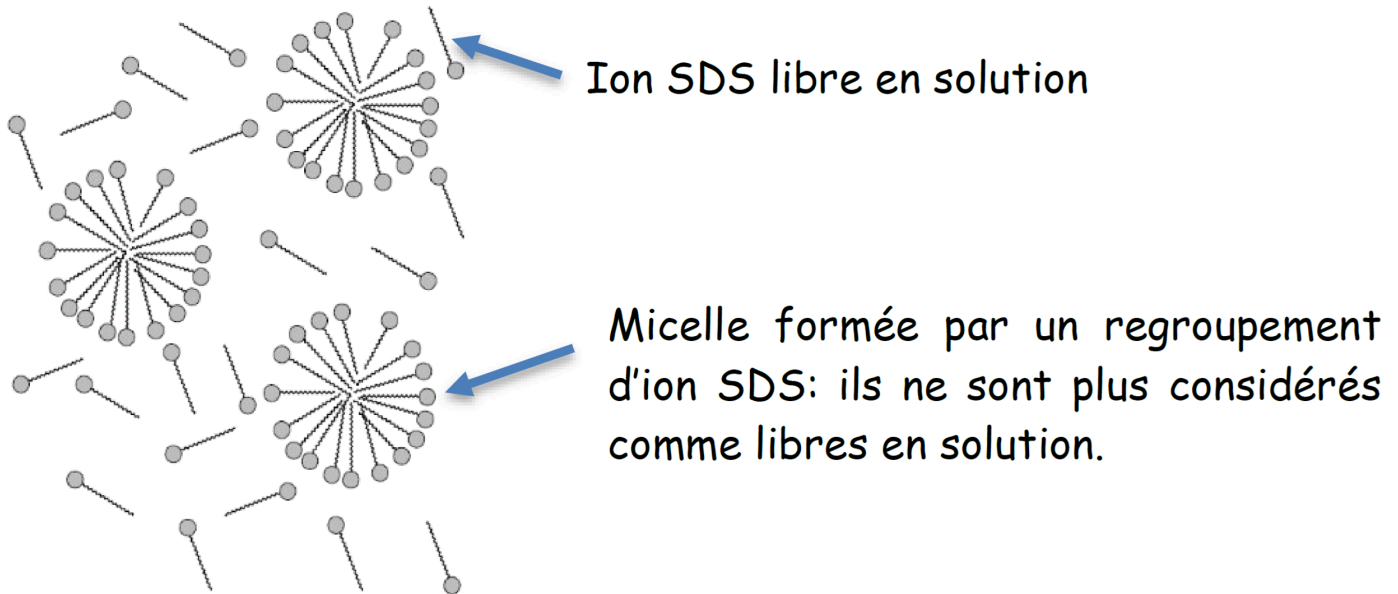

## Document 3 – Tout est question de concentration

Quand on ajoute du SDS à une solution aqueuse, celui-ci se dépose à la surface avec ses **têtes hydrophiles** en contact avec l'eau et les **queues hydrophobes apolaires** orientées vers l'air, afin de **minimiser les interactions défavorables** entre ces dernières et la phase aqueuse polaire.

Une fois que **toute la surface est recouverte de SDS** (la **CMC est alors atteinte**), les molécules de tensioactif ne peuvent plus s'y fixer.

La seule façon d'empêcher les **queues apolaires** d'entrer en contact avec la phase aqueuse est alors que ces dernières **s'agglutinent pour former des micelles**.

Les micelles peuvent alors **piéger les salissures grasses**, qui se concentrent au centre hydrophobe de la micelle.

C'est le **principe d'action des lessives, détergents, savons et shampoings**.

## Document 4 – Rappel : principe de la dilution

La dilution consiste à obtenir une solution **moins concentrée** à partir d'une solution initiale plus concentrée, appelée **solution mère**.

Lors d'une dilution :

- la **quantité de soluté** reste la même,
- seul le **volume de solution** augmente.

La relation de dilution s'écrit :

$$C_{mère} \times V = C_{fille} \times V'$$

où :

- $C_{mère}$  est la concentration de la solution mère,
- $V$  est le volume de solution mère prélevé,
- $C_{fille}$  est la concentration de la solution obtenue,
- $V'$  est le volume final de la solution diluée.

On définit le **facteur de dilution**  $F$  par :

$$F = \frac{V'}{V}$$

Plus le facteur de dilution est élevé, plus la solution obtenue est diluée.

⚠ Lors d'une dilution :

- le prélèvement se fait à l'aide d'une **pipette**,
- le volume final est ajusté dans une **fiolle jaugée**.

## Document 5 – Comprendre “hydrophile / hydrophobe” sans avoir fait la polarité

L'eau est une molécule **polaire** :

- l'oxygène attire plus fortement les électrons → il porte une **charge partielle négative** notée  $\delta^-$
- les hydrogènes portent une **charge partielle positive** notée  $\delta^+$

On peut retenir : l'eau “**aime**” les charges (ou les zones avec  $\delta^+$  /  $\delta^-$ ).

## 1) Liaisons “polaires” et “non polaires” (version simple)

- Une liaison est dite **polaire** quand les électrons sont **plus attirés par un des deux atomes**  
→ on obtient deux extrémités :  $\delta^-$  et  $\delta^+$
- Une liaison est dite **non polaire** quand les électrons sont **partagés à peu près également**  
→ pas de charges partielles marquées

**Règle pratique** (niveau TP) :

- les liaisons impliquant **O** (oxygène) et souvent **S–O** sont **fortement polaires**
- les liaisons **C–C** et **C–H** sont **(quasi) non polaires**

## 2) Application au SDS

- **Tête hydrophile (sulfate)** : elle contient plusieurs atomes **O** et porte une **charge négative** globale (  $\dots SO_3^-$  )  
→ donc **fortes interactions avec l'eau** (attraction eau  $\leftrightarrow$  charge / (  $\delta$  ))  
→ **hydrophile**
- **Queue hydrophobe (chaîne carbonée  $C_{12}H_{25}$ )** : elle contient surtout des liaisons **C–C** et **C–H**  
→ zone **non polaire**, sans charge marquée  
→ l'eau interagit très peu avec cette zone  
→ **hydrophobe**

**Phrase à retenir :**

Chargé / très polaire → hydrophile ; non polaire (C–C, C–H) → hydrophobe.



## PARTIE A – Exploitation documentaire préalable

### 1. Structure du tensioactif SDS

1. Identifier les **deux parties** de l'ion dodécylsulfate.

2. Préciser le **comportement de chacune** vis-à-vis de l'eau.

3. **Expliquer pourquoi** la tête est **hydrophile** et la queue **hydrophobe** (à l'aide du **Document 5**).

Pour t'aider, réponds aux 3 sous-questions :

3a. Repérer sur la **tête** les éléments qui rendent la zone "aimée par l'eau" :

- présence de quel(s) atome(s) ?
- présence d'une charge globale ?

3b. Repérer sur la **queue** le type de liaisons majoritaires (C—C ? C—H ? autres ?) et dire si cette zone est plutôt **polaire** ou **non polaire**.

3c. Conclure en une phrase :

"Donc la tête est ... car ... ; la queue est ... car ..."

## 2. Organisation en solution aqueuse

4. Décrire l'organisation des molécules de SDS :

- lorsque la concentration est **inférieure à la CMC**,
- lorsque la concentration est **supérieure à la CMC**.

5. Expliquer ce qu'est une **micelle** et préciser son **rôle en cosmétologie**.

### 3. Définition de la CMC

6. Proposer une **définition précise** de la CMC.

7. Expliquer pourquoi la CMC correspond à une **concentration seuil**.



## PARTIE B – Manipulation expérimentale

### 4. Protocole expérimental

Une solution **mère** de SDS de concentration massique  $C_{mère} = 11,5 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$  a été préparée à l'avance afin d'éviter la formation de mousse.

On prélève différents volumes  $V$  de cette solution mère, que l'on dilue avec de l'eau distillée pour obtenir un **volume final de 50 mL**.

### 5. Principe de la dilution

8. Rappeler le principe de la dilution reliant  $C_{mère}$ ,  $V$ ,  $C_{fille}$ ,  $V'$ .

9. Définir le **facteur de dilution**  $F$ .

## 6. Préparation des solutions

10. Remplir le tableau suivant :

on a :

- La solution mère de SDS a une concentration massique :  $C_{mère} = 11,5 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ .
- Les solutions filles de SDS ont un volume de 50 mL

Solution	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Volume prélevé (mL)	1,0	3,0	5,0	9,5	10,5	12,5	14,5	16,0	17,5
Facteur de dilution									
Concentration ( $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )									

11. Décrire le **protocole de préparation** et la verrerie utilisée, parmi

- Burette graduée, pipettes jaugées de 5, 10 et 20mL.
- Petits béchers de prélèvement ou transvasement.
- Béchers de 50mL.
- Fiole jaugée de 50mL.



## 7. Conductivité et concentration

La conductivité  $\sigma$  d'une solution ionique est proportionnelle à la **concentration en ions libres** :  $\sigma = k \times C$

12. Quelle est l'allure attendue de la courbe  $\sigma = f(C)$  ?

## 8. Mesure de la conductivité

Solution	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Concentration (g·L <sup>-1</sup> )									
Conductivité (mS·cm <sup>-1</sup> )									



## PARTIE C – Exploitation des résultats

13. Tracer le graphique  $\sigma = f(C)$ .

14. Mettre en évidence **deux zones de comportement**.

15. Déterminer graphiquement la **CMC du SDS** (en g·L<sup>-1</sup>).



## PARTIE D – Interprétation cosmétologique (E2)

16. Le fait d'augmenter fortement la concentration en SDS au-delà de la CMC est-il pertinent ? Rédiger une **réponse argumentée (6 à 8 lignes)**.



### Conclusion

Valeur de la CMC – sens physico-chimique – intérêt en formulation cosmétique.



### Lien explicite avec la méthode

Pour analyser correctement ces documents, se référer à :



**Fiche méthode 03 – Exploiter un graphique de CMC**